



 **GILSON**[®] microman[®]

E

MICROMAN[®] E • Positive-displacement Pipettes



reddot award 2015
winner

Standard
is
Gilson


Triple Protection!
Reliable Results
Even with Non-Aqueous Liquids!



Ordering Information

MICROMAN® E			
모델명	볼륨 (µL)	Capillary Piston	주문번호
M10E	1 - 10	CP10 CP10ST	FD10001
M25E	3 - 25	CP25 CP25ST	FD10002
M50E	20 - 50	CP50 CP50ST	FD10003
M100E	10 - 100	CP100 CP100ST	FD10004
M250E	50 - 250	CP250 CP250ST	FD10005
M1000E	100 - 1000	CP1000 CP1000ST	FD10006

- 오일, 혈액, 글리세롤 등 점성이 있거나 휘발성 액체샘플 피펫팅시 최고의 정밀도 제공
- 에어로졸 형성 및 교차 오염을 완벽하게 차단하여 샘플과 사용자의 안전성 확보
- 특허 받은 **QuickSnap** 기능을 통해 한 번의 동작으로 **Capillary Piston**을 안전하게 장착하고 보호함
- 다음과 같은 상황의 문제를 해결
 - 점성 용액: 샘플을 흡입하기 어려움
 - 휘발성 용액: 압력의 차이로 인해 샘플이 누출
 - 차가운 액체: 샘플이 많이 흡입
 - 뜨거운 액체: 샘플이 적게 흡입

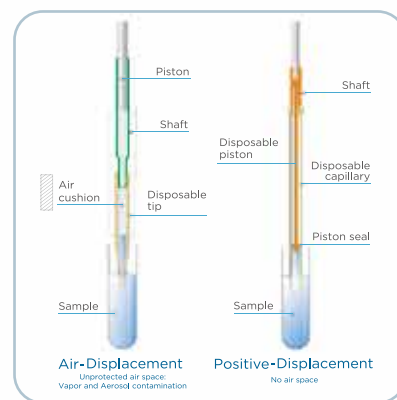

- **Positive Displacement**
샘플과 피스톤 사이의 공기층 없이 직접 치환하는 방식

Capillary Pistons

교차오염으로부터 100% 보호!

Ordering Information

CAPILLARY PISTON							
Capillary Piston Model		Volume Range(µL)	MICROMAN® E Model Compatibility	CP Qty/ Rack	Rack Qty/ Commercial Unit	CP Qty/ Commercial Unit	Part Number
TIPACK - Assembled CP	Capillary Piston 10 µL (CP10)	1 - 10	M10E	96	2	192	F148412
					10	960	F148312
	Capillary Piston 25 µL (CP25)	3-25	M25E	96	10	960	F148012
	Capillary Piston 50 µL (CP50)	20 - 50	M50E	96	10	960	F148013
	Capillary Piston 100 µL (CP100)	10-100	M100E	96	2	192	F148414
				10	960	F148314	
	Capillary Piston 250 µL (CP250)	50-250	M250E	96	10	960	F148014
Capillary Piston 1000 µL (CP1000)	100 -1000	M1000E	91	2	182	F148560	
TIPACK - Assembled Sterilized CP	Sterilized Capillary Piston 10 µL (CP10ST)	1 - 10	M10E	96	2	192	F148413
					10	960	F148313
	Sterilized Capillary Piston 25 µL (CP25ST)	3-25	M25E	96	6	576	F148712
	Sterilized Capillary Piston 50 µL (CP50ST)	20 - 50	M50E	96	6	576	F148713
	Sterilized Capillary Piston 100 µL (CP100ST)	10-100	M100E	96	2	192	F148415
				10	960	F148315	
	Sterilized Capillary Piston 250 µL (CP250ST)	50-250	M250E	96	6	576	F148714
Sterilized Capillary Piston 1000 µL (CP1000ST)	100 -1000	M1000E	91	2	182	F148180	



- 일회용 피스톤이 팁 내부에 있어 유해한 샘플이 피펫을 오염시키지 않아 사용자가 안심하고 사용할 수 있습니다.
 - 화학물질 오염 위험 없음
 - 얇게 디자인 되어 대부분의 튜브에 사용하기 적합



신영코퍼레이션
길슨 공식 대리점 · 공식 서비스



국제공인교정기관
(인정번호: KC24-444호)

제품 문의 TEL 02-575-7476 FAX 02-575-7472
이메일 syc@sycos.co.kr 홈페이지 www.sycos.co.kr

서비스 센터 TEL 02-575-7471 FAX 02-575-7472
이메일 service@sycos.co.kr
06748 서울특별시 서초구 양재천로21길 22 광명빌딩 2층



신영홈페이지



인스타그램